




Chromprep G 自动染片机



Chromprep G自动染片机应用于染色体的显带操作。根据设定的显带方法，Chromprep G自动染片机实现染色体显带过程中消化、终止、染色和清洗过程的自动化操作。Chromprep G自动染片机一次可以进行24张标准载玻片的显带操作。在批量染片过程中，所有样品经过完全相同的显带过程，保证了样品处理的一致性和重复性，消除了人为操作的误差，提高染片效率，同时有助于提高染色体的制备质量，实现染色体显带的自动化和标准化。配套专用的试剂Chromed（胰酶、缓冲液、Giemsa染色液）带纹清晰，每步处理时间稳定。

『技术参数』

- 高通量，一次可以处理24张标准载玻片；
- 独立的温度控制装置；
- 每个缸配置独立可调速的磁力搅拌装置；
- 显带分辨率高；
- 重复性和一致性好；
- 过程监控，标本安全；
- 参数设定灵活，使用方便。

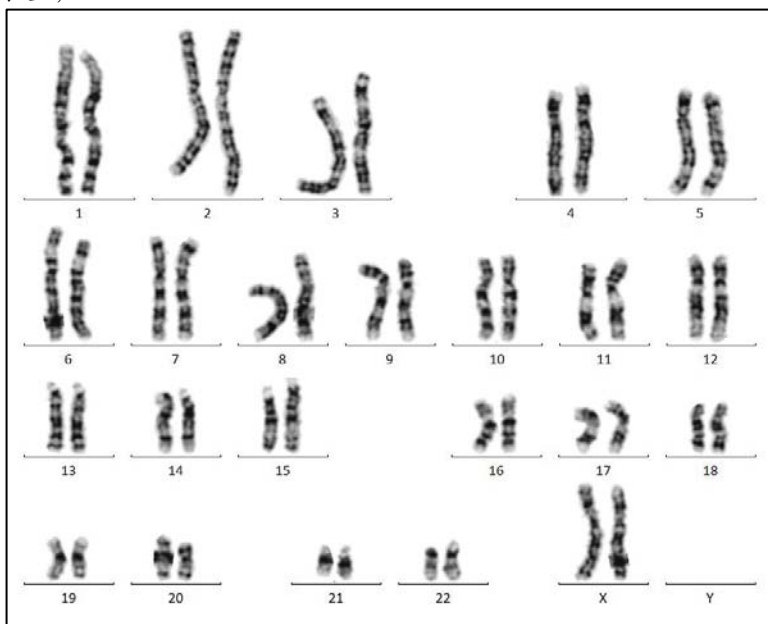

上海乐辰生物科技有限公司

上海市宝山区呼兰路911弄11号3号楼206室 200431

Tel: 021-51853815 Free: 400-0021-908 Fax: 021-51916025

Http://www.sinochrome.net E-mail: cyto@sinochrome.net

Sinochrome
Solutions for cytogenetics

Chromprep G 自动染片机

	项目	技术参数	说明
1	单次染色载玻片数	24 张	
2	载玻片规格	76 x 26 mm, 75x25mm	厚度 0.8~1.2mm
3	液缸 1	400mL	
4	液缸 2	500mL	
5	温度设定	室温~40℃	设定两个缸的温度
6	搅拌速度	1~5	
7	电源	220V(+/-10%), 500W(Max), 50Hz	
8	保险丝	220V, 3 A	
9	工作环境	温度: 15℃~25℃, 湿度: 20% ~ 60%	不冷凝
10	保存环境	温度: 0℃~40℃, 湿度: 0% ~ 95%	
11	重量	25KG	
12	尺寸	500W×346D×324H, 单位 mm	